



**GIRAFFE  
BOTTLE**

IDRATAZIONE CON UNO SCOPO™

**L'IDRATAZIONE  
SENZA MANI**

# GUIDA PER LA CURA E L'USO

...PRESENTANDO IL COLLO 'TOWER XL'



... RENDIAMO  
L'IDRATAZIONE  
PIÙ ACCESSIBILE

# Manutenzione dei Componenti



## Kit Borraccia per Plastica Tritan™ + Acciaio Inossidabile





NON POSIZIONARE  
BOTTIGLIE IN  
CONGELATORE/  
MICROONDE

Temperatura Operativa Massima: 85°C / 185°F




LAVABILE IN  
LAVASTOVIGLIE

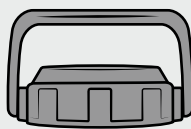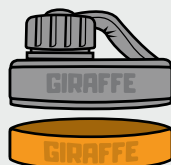

NON ADATTA ALLA  
LAVASTOVIGLIE



LAVARE A  
MANO

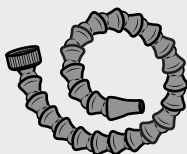


Evitare di immergere il gruppo del collo durante la pulizia: pulire la superficie esterna

## Cannula per Bere + Valvola di Morso

La valvola di morso deve essere rimossa per **NON** essere forata dallo scovolino per la pulizia della cannula.



PER LA PULIZIA  
UTILIZZARE LO SCOVOLINO  
IN DOTAZIONE

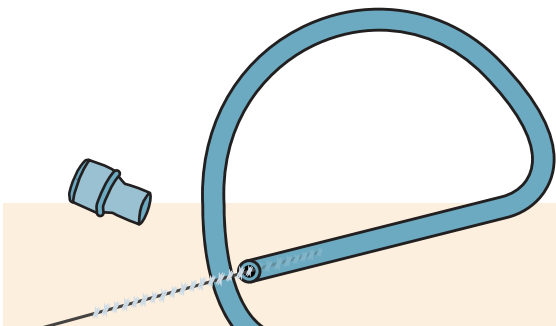


Se hai una sensibilità al gusto alla cannula da bere in dotazione (dopo il lavaggio), chiedi un tubo alternativo.



# Da Assemblare

## “Tower XL” Montaggio del Collo

La struttura è progettata per scomporsi a incastro, in modo da regolare la lunghezza del collo secondo necessità.

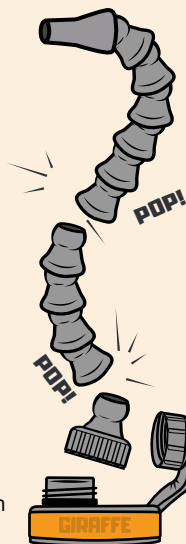

**!** Se si teme che la valvola a morso rappresenti un pericolo come un piccolo oggetto, rimuoverla dal cannula per bere durante l'uso

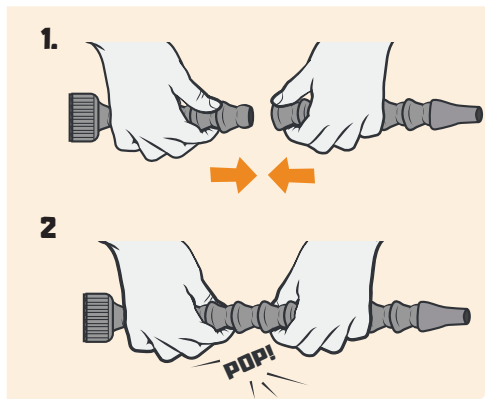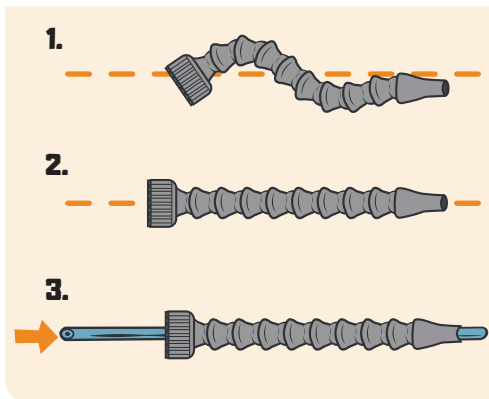

## PROGRAMMA PER LA SOSTITUZIONE

CANNULA PER BERE . . . . ENSILMENTE

SCOVOLINO PER LA PULIZIA . . . . . OGNI 3 MESI

VALVOLA DI MORSO . . . . . ENSILMENTE

COLLO MODULARE . . . . . OGNI 3 MESI


Si consiglia di sostituire le parti del sistema “Tower XL” della Giraffe Bottle, per mantenere una funzionalità sana e ottimale della borraccia.



# L'uso Consigliato

## Quali Bevande si Possono Bere?

Giraffe Bottle è consigliata per acqua e altri **liquidi non viscosi**.  
Rimuovere la valvola di morso quando si gustano altre bevande.

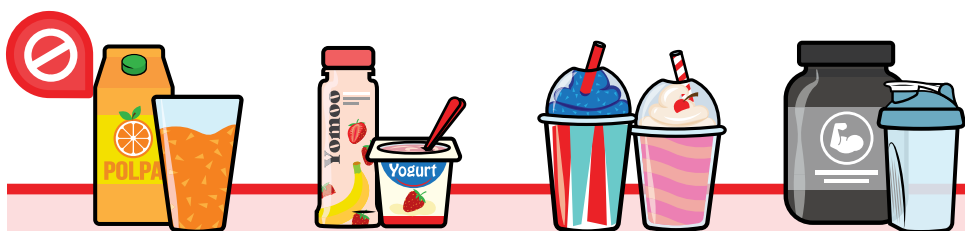


! La valvola di morso potrebbe ostruirsi se utilizzata con bevande più dense

## Controllare il Flusso

Premere la valvola del morso tra due superfici (movimento del morso) ne consente l'apertura. In combinazione con l'aspirazione, puoi controllare il flusso della tua bevanda e sai che non perderà fuori dall'uso.

Con la valvola di morso in posizione, la tua bevanda non tornerà indietro bottiglia dopo aver bevuto un sorso. Se la valvola a morso non è necessaria per il tuo applicazione, può essere facilmente rimosso.

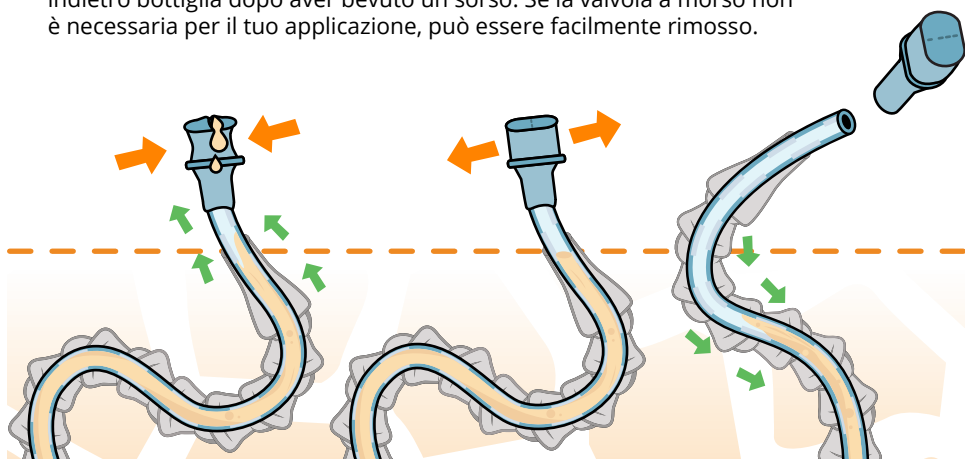

! Questo sistema è consigliato a soggetti con buon controllo delle funzioni orali

# IL SISTEMA A 'TOWER XL'



**LUNGHEZZE DEL COLLO DISPONIBILI**

15", 25", 30", 36"  
(38 cm, 64 cm, 76 cm, 91 cm)

**TIPI DI CANNULA PER BERE**

Grande, Circondato da Plastica Modulare  
5/32" (4mm) Diametro Interno

**TIPI DI CONTROLLO DEI LIQUIDI**



Valvola di Morso  
\*Può Essere Rimosso dal Tubo

**OPZIONI PER PORTA BOTTIGLIE**

Porta Bottiglie in Alluminio

**QUESTO SISTEMA È IL MIGLIORE PER:**

Individui con polmone intero e funzione della bocca, ma minima o nulla mobilità della parte superiore del corpo.

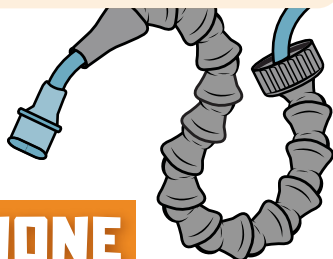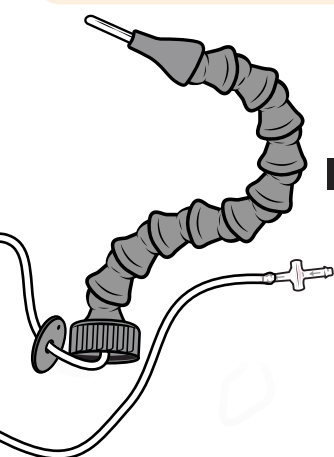

**LIVELLI DI**

## IDRATAZIONE

Giraffe Bottle offre alcune opzioni uniche per l'idratazione senza mani, ognuna delle quali è personalizzata per esigenze e scopi diversi, tenendo conto delle esperienze delle persone

I nostri sistemi sono compatibili con ogni bottiglia; Esplorali tutti e scopri quale si adatta meglio alle tue esigenze!



**FAQ'S**

Avete domande sul vostro sistema attuale?

[WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM/PRODUCT-FAQ](http://WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM/PRODUCT-FAQ)

### CENTRO DI APPRENDIMENTO

Visita il [GiraffeBottle.com](http://GiraffeBottle.com) Centro Di Apprendimento per esplorare l'idratazione senza mani e le domande frequenti sui nostri prodotti. Si prega di contattare Giraffe Bottle per qualsiasi domanda, commento o feedback.



# Accessori per Giraffe Bottle



## Stili di Giraffe Bottle

Plastica Tritan™: ..... #504111  
Nero: ..... #504211  
Arancione: ..... #504212  
Lt. Ed. SGN Borraccia: ..... #504221

## Cannula per Bere + Valvola di Morso

Per un Collo da 15": #504072  
Per un Collo da 25": #504074  
Per un Collo da 30": #504075  
Per un Collo da 36": #504076

## Kit di Partenza 'Tower XL'

Collo da 15": ..... #505162  
Collo da 25": ..... #505164  
Collo da 30": ..... #505165  
Collo da 36": ..... #505166

## Porta Bottiglie con Morsetto

Si monta su sedie a rotelle e altri tubi rotondi.

#500311

## Porta Bottiglie per Cuscini

Scivola sotto i materassi, sedile cuscini e altre superfici.

#500322

## Base da Tavolo Ponderata

Evitare che la bottiglia d'acqua si ribalti e posizionarla saldamente nella base di un ripiano.

#500323

## Porta Bottiglie per Staffa Rail

Si aggancia alle sedie a rotelle elettriche con guide accessorie (include Quantum™, Permobil™).

#500314

## Altri Accessori Online

Per alternare cannula per bere (a causa della sensibilità al gusto), accessori e altre parti di ricambio, esplora online o contatta Giraffe Bottle.

[WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM](http://WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM)

IN MOSTRA: SPAZZOLE PER LA PULIZIA DI BOTTIGLIE D'ACQUA E CANNULA PER BERE, VALVOLA DI MORSO



**GIRAFFE**  
BOTTLE

una divisione di:  
**Oak Hill**  
BRANDS CORP.

[SALES@GIRAFFEBOTTLE.COM](mailto:SALES@GIRAFFEBOTTLE.COM)

1-630-922-5004

Prodotto progettato e assemblato negli Stati Uniti. Prodotto con componenti statunitensi e globali.

Le informazioni e le specifiche elencate sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Permobil, Quantum e tutti gli altri marchi che possono essere stati menzionati, direttamente o indirettamente, sono marchi di qualcun altro e non sono di proprietà di Oak Hill Brands. Giraffe Bottle è un marchio registrato di Oak Hill Brands Corp.