

# GUIDA PER LA CURA E L'USO

...PRESENTANDO IL COLLO 'JOURNEY'



... RENDIAMO  
L'IDRATAZIONE  
PIÙ ACCESSIBILE


# Manutenzione dei Componenti

## Kit Borraccia per Plastica Tritan™ + Acciaio Inossidabile





NON POSIZIONARE  
BOTTIGLIE IN  
CONGELATORE/  
MICROONDE

Temperatura Operativa  
Massima: 185°F / 85°C

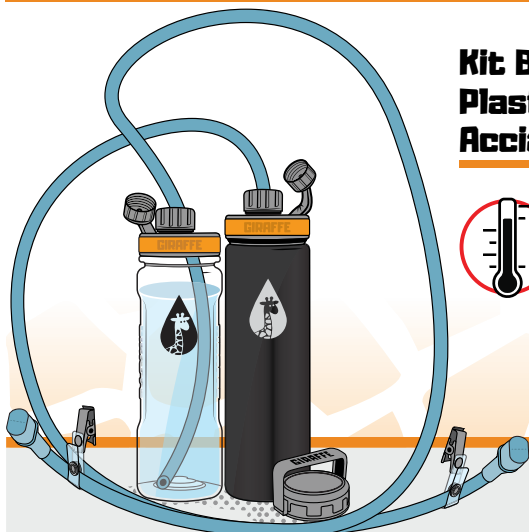


LAVABILE IN  
LAVASTOVIGLIE

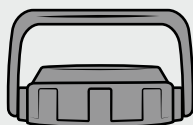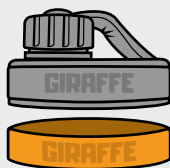

NON ADATTA ALLA  
LAVASTOVIGLIE



LAVARE A  
MANO

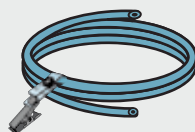


## Cannula per Bere + Valvola di Morso

La valvola di morso deve essere rimossa per **NON** essere forata dallo scovolino per la pulizia della cannula.



PER LA PULIZIA  
UTILIZZARE LO SCOVOLINO  
IN DOTAZIONE

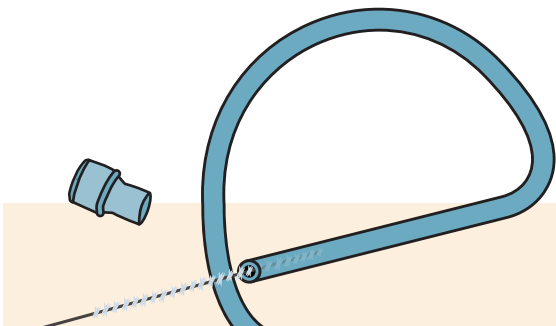

Se hai una sensibilità al gusto alla cannula da bere in dotazione (dopo il lavaggio), chiedi un tubo alternativo.

# Da Assemblare



## “Journey” Montaggio del Collo

Una clip rimovibile può essere attaccata a vestiti e tessuti quando non vengono utilizzati, senza rischio di perdite.



SE NECESSARIO IL  
TUBO PUÒ ESSERE  
TAGLIATO A MISURA

**!** Se si teme che la valvola a morso rappresenti un pericolo come un piccolo oggetto, rimuoverla dal cannula per bere durante l'uso

## Supporti Multipli

Abbina il Sistema “Journey” ai Portabottiglie, oppure alla borsa per il trasporto in carrozzina, in spalla, ecc.



# PROGRAMMA PER LA SOSTITUZIONE

CANNULA PER BERE . . . . ENSILMENTE

SCOVOLINO PER LA PULIZIA . OGNI 3 MESI

VALVOLA DI MORSO . . . . ENSILMENTE


Si consiglia di sostituire le parti del sistema “Journey” della Giraffe Bottle, per mantenere una funzionalità sana e ottimale della borraccia.



# L'uso Consigliato

## Quali Bevande si Possono Bere?

Giraffe Bottle è consigliata per acqua e altri **liquidi non viscosi**.  
Rimuovere la valvola di morso quando si gustano altre bevande.

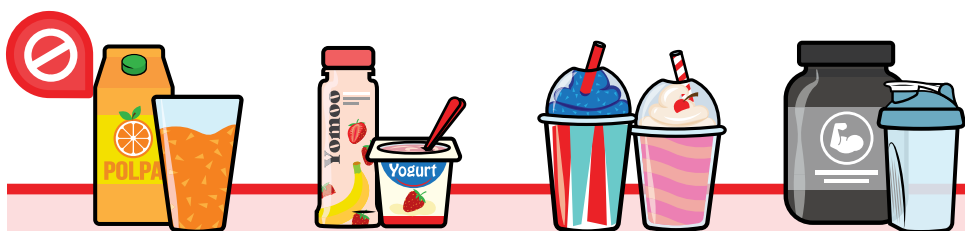

! La valvola di morso potrebbe ostruirsi se utilizzata con bevande più dense

## Evita Perdite

Il sistema "Journey" è autonomo e perfetto per una varietà di applicazioni attive. Questi includono, ma non sono limitati a: assistenza post-operatoria, recupero postpartum, kayak, escursionismo, ciclismo e altro ancora.

Per evitare perdite durante l'uso, non appoggiare completamente la bottiglia su un fianco e non capovolgerla



! Questo sistema è consigliato a soggetti con buon controllo delle funzioni orali

# IL SISTEMA A "JOURNEY"

**LUNGHEZZE DEL COLLO DISPONIBILI**

36 Inch (91 cm)  
\*Se necessario è possibile tagliarlo su misura

**TIPI DI CANNULA PER BERE**

Grand Tube Flexible  
1/4" (6.4mm) Diametro Interno

**TIPI DI CONTROLLO DEI LIQUIDI**

Válvula de Mordida  
\*Può Essere Rimosso dal Tubo

**OPZIONI PER PORTA BOTTIGLIE**

Porta Bottiglie in Alluminio/  
Borsa per il Trasporto

**QUESTO SISTEMA È IL MIGLIORE PER:**

Individui con mobilità limitata della parte superiore del corpo, in combinazione con piena funzionalità polmonare e orale.

**LIVELLI DI**

## IDRATAZIONE

Giraffe Bottle offre alcune opzioni uniche per l'idratazione senza mani, ognuna delle quali è personalizzata per esigenze e scopi diversi, tenendo conto delle esperienze delle persone

I nostri sistemi sono compatibili con ogni bottiglia; Esplorali tutti e scopri quale si adatta meglio alle tue esigenze!



**FAQ'S**

**Avete domande sul vostro sistema attuale?**

[WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM/PRODUCT-FAQ](http://WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM/PRODUCT-FAQ)

### CENTRO DI APPRENDIMENTO

Visita il [GiraffeBottle.com](http://GiraffeBottle.com) Centro Di Apprendimento per esplorare l'idratazione senza mani e le domande frequenti sui nostri prodotti. Si prega di contattare Giraffe Bottle per qualsiasi domanda, commento o feedback.




# Accessori per Giraffe Bottle



## Stili di Giraffe Bottle

Plastica Tritan™: ..... #504111  
Nero: ..... #504211  
Arancione: ..... #504212  
Lt. Ed. SGN Borraccia: ..... #504221

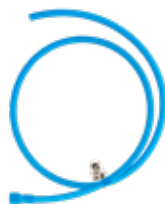

## Cannula per Bere + Valvola di Morso

Combo cannula e valvola di morso per sistemi "Journey".

#505181



## Borsa per il Trasporto

Per il trasporto in carrozzina, in spalla, ecc.

#504062



## Porta Bottiglie con Morsetto

Si monta su sedie a rotelle e altri tubi rotondi.

#500311



## Porta Bottiglie per Cuscini

Scivolo sotto i materassi, sedile cuscini e altre superfici.

#500332



## Base da Tavolo Ponderata

Evitare che la bottiglia d'acqua si ribalti e posizionarla saldamente nella base di un ripiano.

#500323



## Porta Bottiglie per Staffa Rail

Si aggancia alle sedie a rotelle elettriche con guide accessorie (include Quantum™, Permobil™).

#500314



IN MOSTRA: SPAZZOLE PER LA PULIZIA DI BOTTIGLIE D'ACQUA E CANNULA PER BERE, VALVOLA DI MORSO, CLIP PER TUBO

## Altri Accessori Online

Per alternare cannula per bere (a causa della sensibilità al gusto), accessori e altre parti di ricambio, esplora online o contatta Giraffe Bottle.

[WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM](http://WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM)



**GIRAFFE**  
BOTTLE

una divisione di:  
**Oak Hill**  
BRANDS CORP.

[SALES@GIRAFFEBOTTLE.COM](mailto:SALES@GIRAFFEBOTTLE.COM)

1-630-922-5004

Prodotto progettato e assemblato negli Stati Uniti. Prodotto con componenti statunitensi e globali.

Le informazioni e le specifiche elencate sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Permobil, Quantum e tutti gli altri marchi che possono essere stati menzionati, direttamente o indirettamente, sono marchi di qualcun altro e non sono di proprietà di Oak Hill Brands. Giraffe Bottle è un marchio registrato di Oak Hill Brands Corp.