



**GIRAFFE
BOTTLE**

FLÜSSIGKEITZUFUHR MIT EINEM ZWECK™

**FREIHAND-
TRÄNKESYSTEM**

PFLEGE - UND GEBRAUCHSANLEITUNG

...MIT DEM "TOWER XL"-HALES



... ERLEICHTERN
SIE DEN ZUGANG ZU
FLÜSSIGKEITZUFUHR

Komponenten Pflege

Tritan™ Plastik + Edelstahl Flaschen-Kits





FLASCHEN
NICHT IN DEN
GEFRIERSCHRANK/DIE
MIKROWELLE STELLEN

Maximale Betriebstemperatur: 185°F / 85°C




SPÜLMASCHINENFEST

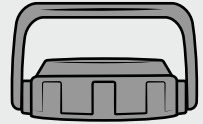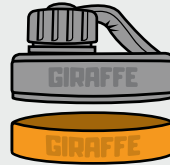

NICHT
SPÜLMASCHINENFEST



NUR HANDWÄSCHE

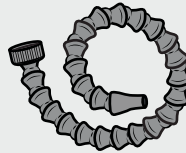


Vermeiden Sie es, den modularen Hals während der Reinigung einzutauchen – wischen Sie die Außenfläche ab

Trinkschlauch + Beißventil

Das Beißventil muss während der Reinigung entfernt werden und sollte **NICHT** mit der Schlauchreinigungsbürste durchstochen werden.



MITGELIEFERTER
REINIGUNGSBÜRSTE
VERWENDEN

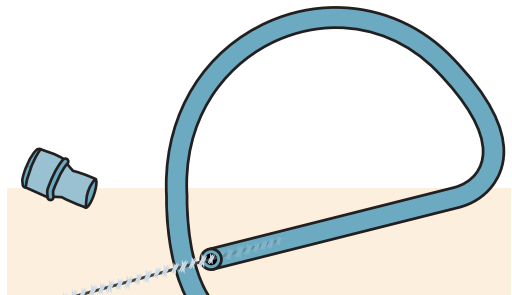


Wenn Sie eine Geschmacksempfindlichkeit gegenüber dem mitgelieferten Trinkschlauch (nach dem Waschen) haben, erkundigen Sie sich nach einem alternativen Schlauch



Die Montage

“Tower XL” Montage des Halses

Die Montage ist so konstruiert, dass sie auseinandergeklappt werden kann, um die Halslänge nach Bedarf anzupassen.

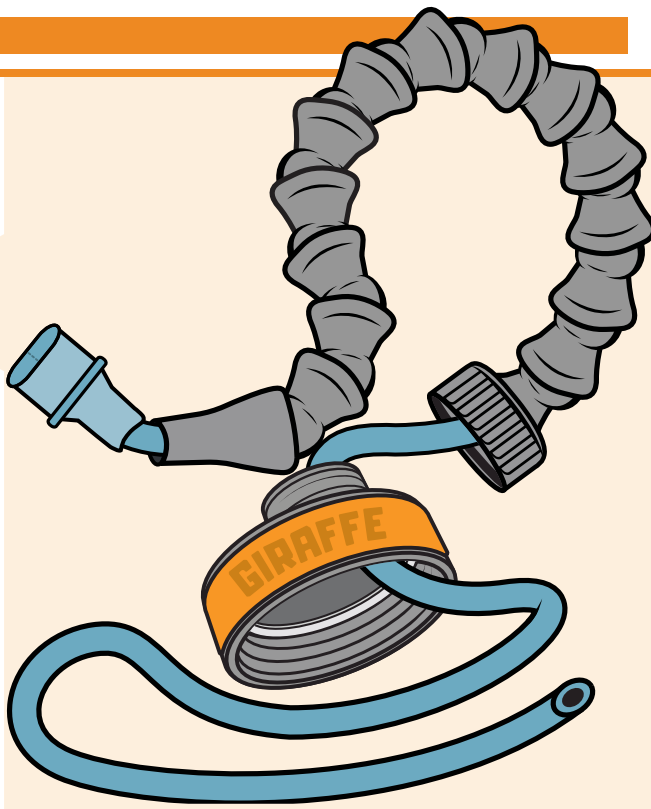

! Wenn Sie befürchten, dass das Beißventil als kleiner Gegenstand eine Gefahr darstellen könnte, entfernen Sie es während des Gebrauchs aus dem Trinkschlauch

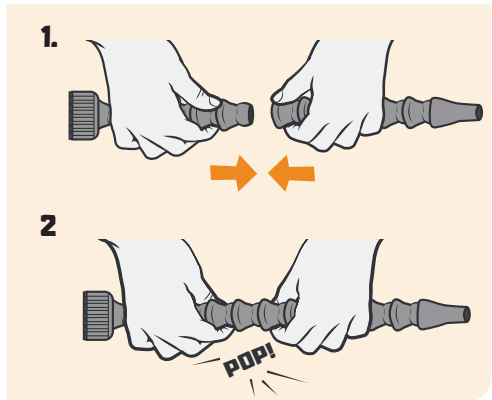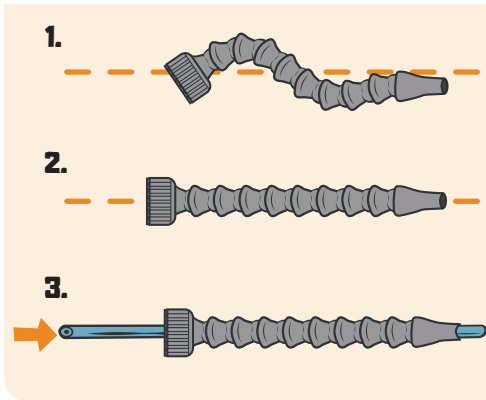

ZEITPLAN FÜR DEN AUSTAUSCH

TRINKSCHLAUCH MONATLICH

REINIGUNGSBÜRSTE . . JEDEN 3. MONAT

BEIßVENTIL MONATLICH

MONTAGE DES HALSES . JEDEN 3. MONAT


Es wird empfohlen, wesentliche Teile des Giraffe Bottle™ “Tower XL” Trinksystems regelmäßig zu ersetzen, um eine optimale Hygiene und Funktion der Flasche zu gewährleisten.



Verzehrempfehlung

Welche Getränke kann man Trinken?

Die Giraffe Bottle wird für Wasser und andere **nicht viskose Flüssigkeiten** empfohlen. Entfernen Sie das Beißventil, wenn Sie andere Getränke genießen.

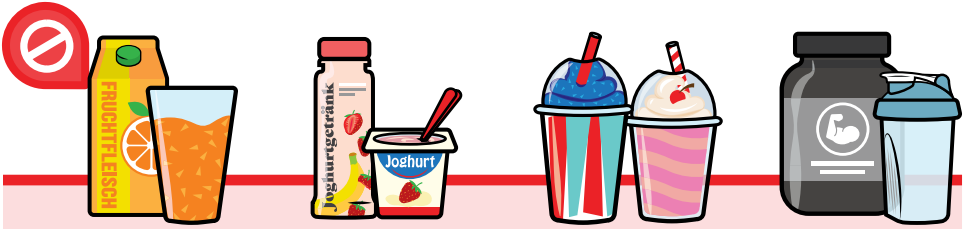


! Das Beißventil kann verstopfen, wenn es mit dickeren Getränken verwendet wird

Kontrollieren des Durchflusses

Drückt man das Beißventil zwischen zwei Flächen (Beißbewegung), öffnet es sich. In Kombination mit dem Absaugen können Sie den Fluss Ihres Getränks kontrollieren und sicher sein, dass es nicht ausläuft.

Wenn das Beißventil angebracht ist, zieht sich Ihr Getränk nach einem Schluck nicht in die Flasche zurück. Sollte das Beißventil für Ihre Anwendung nicht geeignet sein, kann es einfach entfernt werden.

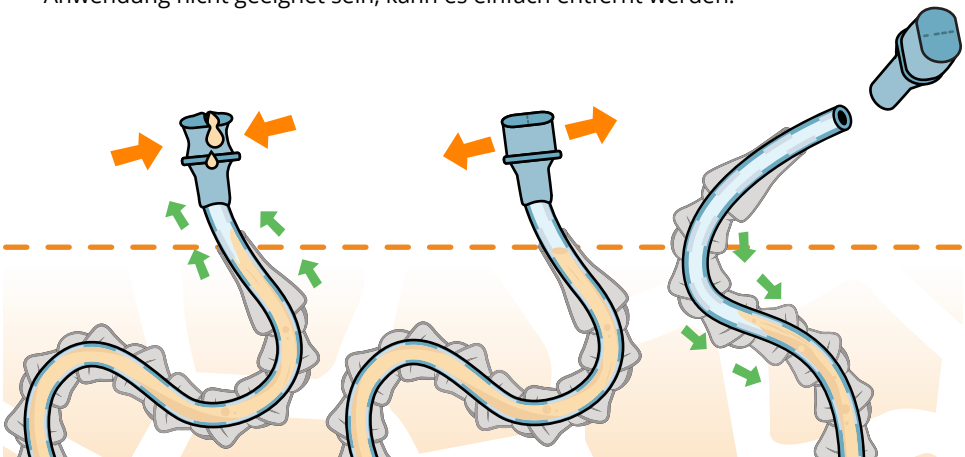

! Dieses System wird für Personen empfohlen, die eine gute Kontrolle über die Mundfunktionen haben

DAS "TOWER XL"-SYSTEM



**HALSLÄNGE
VERFÜGBAR**

15", 25", 30", 36"
(38 cm, 64 cm, 76 cm, 91 cm)

**ART DES
TRINKSCHLAUCHS**

Groß, Umgeben von
Modularem Kunststoff
5/32" (4mm) Innendurchmesser

**ART DER
FLUIDSTEUERUNG**



Beißventil
*Abnehmbar aus dem Rohr

**OPTIONEN FÜR
GETRÄNKEHALTER**

Porta Bottiglie in Alluminio

**DIESES SYSTEM
EIGNET SICH AM
BESTEN FÜR:**

Personen mit voller Lungen- und
Mundfunktion, aber wenig bis gar
keiner Beweglichkeit des Oberkörpers.

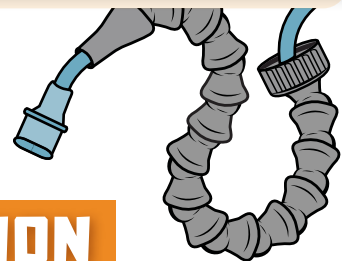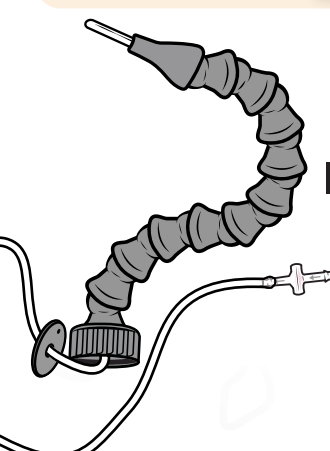

NIVEAUS VON I

HYDRATION

Die Giraffe Bottle bietet einige einzigartige Optionen für die freihändige Flüssigkeitszufuhr. Jede ist auf unterschiedliche Bedürfnisse und Zwecke zugeschnitten und berücksichtigt die Erfahrungen des Einzelnen.

Unsere Systeme sind mit jeder Flasche kompatibel; Entdecken Sie sie alle und finden Sie heraus, welche Ihren Bedürfnissen am besten entspricht!



FAQ'S

Fragen zu Ihrem
Aktuelles System?

WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM/PRODUCT-FAQ

LERNZENTRUM

Besuchen Sie das Lernzentrum auf GiraffeBottle.com, um die freihändige Flüssigkeitszufuhr und häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten zu entdecken. Zögern Sie nicht, Giraffe Bottle zu kontaktieren, wenn Sie Fragen, Kommentare oder Feedback haben.



Giraffe Bottle Zubehör



Ersatz Giraffe Bottle

Tritan™ Plastik: #504111
Rauchschwarz: #504211
Gebranntes Orange: #504212
Lt. Ed. SGN Flasche: #504221

Trinkschlauch + Beißventil

Für den 15" Hals: .. #504072
Für den 25" Hals: .. #504074
Für den 30" Hals: .. #504075
Für den 36" Hals: .. #504076

Starterkit 'Tower XL'

15 Zoll Hals: #505162
25 Zoll Hals: #505164
30 Zoll Hals: #505165
36 Zoll Hals: #505166

Flaschenhalter mit Klemme

Halterungen an Rollstühlen
und anderen Rundrohren.

#500311

Flaschenhalter für Kissen

Schieben Sie sich unter
Matratzen, Sitzkissen und
andere Oberflächen

#500332

Gewichteter Wasserflaschenhalter für den Schreibtisch

Schützen Sie Ihre Flasche vor dem
Umkippen, indem Sie sie fest in
einen Wasserflaschenhalter stellen.

#500323

Flaschenhalter für Schienen

Lässt sich an Elektrorollstühlen
befestigen mit Zubehörschienen
(inkl. Quantum™, Permobil™).

#500314

Mehr Zubehör Online

Für alternative Trinkschläuche (aufgrund
der Empfindlichkeit im Geschmack),
Zubehör und sonstiger Ersatzteile,
recherchieren Sie online oder
kontaktieren Sie Giraffe Bottle.

WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM

AUSGESTELLT: REINIGUNGSBÜRSTEN FÜR
FLASCHEN UND TUBEN, BEIßVENTIL



GIRAFFE
BOTTLE

eine Abteilung von:
Oak Hill
BRANDS CORP.

SALES@GIRAFFEBOTTLE.COM

1-630-922-5004

Das Produkt wurde in den USA entwickelt und montiert. Hergestellt mit US-amerikanischen und globalen Komponenten.
Die aufgeführten Informationen und Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Permobil, Quantum und alle anderen Marken, die direkt oder indirekt erwähnt wurden, sind Marken von jemandem und sind nicht
Eigentum von Oak Hill Brands. Giraffe Bottle ist eine eingetragene Marke von Oak Hill Brands Corp.